



GO BEYOND YOUR
THERAPEUTIC LIMITS





WINBACK
I N N O V A T I O N



Ολοκληρωμένη εμπειρία

Όλες οι ανάγκες και επιθυμίες σας μέσα σε μία ασφαλή αποτελεσματική και άνετη θεραπευτική λύση. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να φτάσετε και στο πιο δύσκολο θεραπευτικό αποτέλεσμα, περιορίζοντας άμεσα τον πόνο.


WINBACK

Σχεδιάστηκε για τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο

Η WINBACK καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο παραμένοντας πιστή στις θεραπευτικές σας αξίες. Η WINBACK δημιουργεί μια νέα σειρά TECAR που επιταχύνει τις φάσεις αποκατάστασης του ασθενούς σας με μοναδική θεραπευτική απόδοση.

Η νέα σειρά της WINBACK συνδιάζει ταυτόχρονα έως και 3 διαφορετικές μορφές ρεύματος (χαμηλή, μεσαία και υψηλή συχνότητα), περιλαμβάνοντας πάνω από 20 καινοτόμα αξεσουάρ. Οι σειρές μας, BACK3TX και BACK4 προσαρμόζονται σε όλες τις θεραπευτικές τεχνικές δίνοντας στην καθημερινότητά σας εργονομία, ασφάλεια και άνεση κατά την χρήση.



Βελτιώνουμε τις θεραπείες σας

Η WINBACK απαντά στη βασική ερώτηση:

Πως μπορώ να πετύχω γρηγορότερα αποτελέσματα και ταχύτερη αποκατάσταση;

+ Αποτελεσματικότητα


Χάρη στη λειτουργία πολλαπλών συχνοτήτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και τρία ρεύματα ηλεκτροθεραπείας ταυτόχρονα (TECAR, Hi-TENS, Hi-EMS), μέσα από την ίδια κεφαλή (RET).

+ Αντίληψη

Οι πατενταρισμένες τεχνολογίες της WINBACK: Power-In, λαβή TX και βραχιόλια, κάνουν την εργασία σας αποδοτικότερη.

+ Έξυπνο

Η συσκευή σας γίνεται ο βοηθός σας: η τεχνολογία WINBACK συνδέεται με τη θεωρητική και πρακτική σας γνώση κάνοντας την καθημερινότητά σας ευκολότερη.

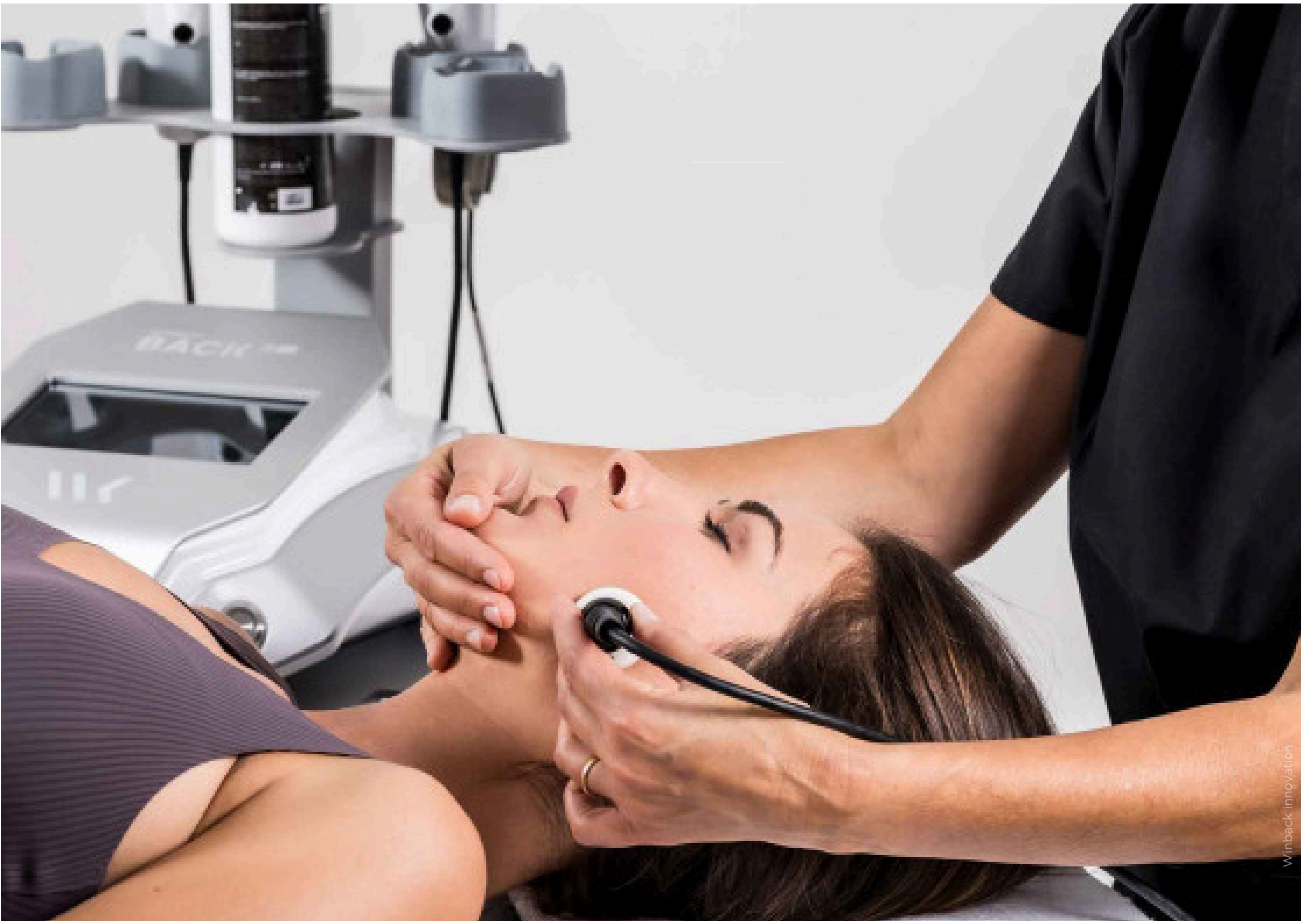



Απογειώστε τις θεραπείες σας

Ενισχύστε τα αποτελέσματά σας

100% συμβατή με τις υπάρχουσες τεχνικές σας, η σειρά BACK3TX και BACK4 υποστηρίζει στην τεχνογνωσία σας: χειρισμοί, σπληχνική κινητοποίηση, μυοπεριτονιακή θεραπεία, βελονισμός, ενεργητική αποκατάσταση, κ.λπ.

Manual therapy ή function rehabilitation

Οι θεραπείες δεν πραγματοποιούνται μόνο στο κρεβάτι
θεραπείας! Τα ρεύματα και τα αξεσουάρ της **WINBACK**
επιτρέπουν πιο ενεργητικές θεραπείες. Η τεχνολογία
WINBACK διευκολύνει όλα τα στάδια της
αποκατάστασης.



Ο νέος σας βοηθός

**Hands-free ή hands-on;
Εξαρτάται από εσάς!**

Ο χρόνος είναι πολύτιμος: εκτελέστε τη συνεδρία
όπως θέλετε. Ρυθμίστε μια θεραπεία σε λιγότερο
από ένα λεπτό. Το σύστημα πολλαπλών συχνοτήτων
επιτρέπει μικρότερους χρόνους θεραπείας από ό,τι
με τη συμβατική θεραπεία tecar.

A hand holding a device, possibly a handheld scanner or a specialized tool, is shown in the upper left. The background is dark with a glowing blue DNA helix structure on the right side, suggesting a high-tech or scientific theme.

Πολλαπλές Συχνότητες

**The all-in-one
solution**

HIGH
FREQUENCY
TECAR

Μεταβολική Δράση

Το TECAR είναι ρεύμα υψηλής συχνότητας, που κυμαίνεται από 300 kHz έως 1 MHz.

- › Κυτταρική δράση
- › Ανακούφιση πόνου
- › Θερμικό αποτέλεσμα

MEDIUM
FREQUENCY
Hi-EMS

Στρατολόγηση Κινητικών Μονάδων

Το Hi-EMS δημιουργεί ένα διαμορφωμένο ρεύμα μέσης συχνότητας, διεγείροντας τους επιφανειακούς ή εν τω βάθει μυς, για την επίτευξη ανώδυνης σύσπασης.

- › Εν τω βάθει και επιφανειακή στρατολόγηση μυών για κινητοποίηση
- › Λεμφικό Drainage
- › Focal 1500 Hz module 1.5/100 Hz
- › Radial 4000 Hz module 1.5/100 Hz
- › Drain 4000 Hz module 3.5/50 Hz

LOW
FREQUENCY
Hi-TENS

Ανακούφιση από τον πόνο

Το Hi-TENS είναι ένα χαμηλόσυχο ρεύμα που δημιουργεί διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση.

- › Μακροχρόνια ανακούφιση από τον πόνο - 2 Hz / 5 Hz
- › Άμεση ανακούφιση από τον πόνο - 25 Hz

Δουλέψτε σε όλους τους τύπους ιστών και επέλεξε ένα ευρύτερο πεδίο δράσης

TECAR ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΗΣ

MIX

Fibrotic tissue and scars



CET

Local action on soft tissue



RET

Hard and/or deep tissues



Skin and subcutaneous tissues:

skin, scar, fascia

1000 kHz



Nervous system

500 kHz
(soft)



Soft tissue:

high water density,
muscle, fascia,
lymphatic, vascular

300 kHz
(deep)



Hard tissue:

low water density,
ligament, tendon,
joint, bone

500 kHz
300 kHz

ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

- Hi-TENS

Άμεση ανακούφιση από τον πόνο



25 Hz

5 Hz

2 Hz

- Hi-EMS

Εν τω βάθου κυκλοφορική και μυϊκή στρατολόγηση



4000 Hz

1500 Hz

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

- Hi-TENS
- Hi-EMS
- RET

Λιγότερος πόνος, μεγαλύτερη ένταση, ελευθερία κινήσεων



25 Hz

5 Hz

2 Hz

4000 Hz

1500 Hz

500 kHz
300 kHz

3x

μεγαλύτερη δράση

μόνο με ένα ηλεκτρόδιο


ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗ

Hi-TENS για άμεση ανακούφιση από τον πόνο




ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗ

Hi-EMS για εν τω βάθου μυϊκή διέγερση και βελτίωση της κυκλοφορίας

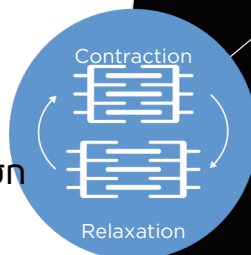

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΣΗ

RET για επιτάχυνση της μεταβολικής δράσης

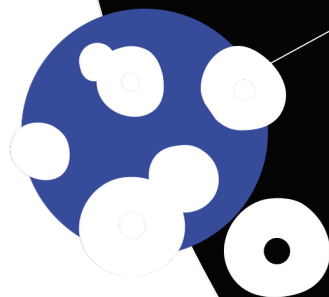

Πολλαπλές συχνότητες σε δράση

Hi-TENS + Hi-EMS + RET

Λιγότερος πόνος, λιγότερη,
τάση, περισσότερη κίνηση.

Διέγερση του μεταβολισμού,
επιτάχυνση της θεραπευτικής
διαδικασίας.



Scan QR
Για περισσότερες
τεχνικές και θεραπείες
από την WINBACK
ACADEMY





Power-In

Η δύναμη που χρειαζομαι

Η ένταση που θέλω

Η κατοχυρωμένη πατέντα της WINBACK, το Power-In παρέχει το βέλτιστο επίπεδο ενέργειας με βάση την αντίσταση ιστού, την απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων.

- › Άνεση
- › Αποδοτικότητα και εργονομία
- › Ασφάλεια





Διασύνδεση Wi-Fi

Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα μιας συνδεδεμένης συσκευής. Όλα έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά έτσι ώστε η γκάμα μας να μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον για να σας δώσει πρόσβαση στα δεδομένα της χρήσης σας.

- › Αναβάθμιση λογισμικού
- › Απομακρυσμένα διαγνωστικά και ενημερώσεις



Wi-Fi



TXTM Έξυπνη Χειρολαβή

Βελτιωμένη χειρολαβή με ηλεκτρόδια all-in-one και απομακρυσμένες αλλαγές προγραμμάτων.

Με το Tecar X (ή TX), μπορείτε να εργαστείτε σε ελάχιστο χρόνο. Η νέα γενιά έξυπνων λαβών, επιτρέπει στον θεραπευτή να εργάζεται με το πλήρες φάσμα των ηλεκτροδίων της WINBACK κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Το TX είναι ικανό να αναγνωρίζει και να προσαρμόζεται αυτόματα σε διαφορετικούς τύπους ηλεκτροδίων και προγραμμάτων. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία Dynamic Power-In, το TX παρέχει αυτόματα τη σωστή ισχύ με βάση την αντίσταση του ασθενούς και το μέγεθος του ηλεκτροδίου.







Βραχιόλια



Εντελώς μη επεμβατικά, τα διπλά βραχιόλια RET προσφέρουν ελευθερία στις κινήσεις σας. Ζήστε την εμπειρία της αφής, αντιλαμβανόμενοι το θεραπευτικό αποτέλεσμα που δίνετε στον ασθενή σας.

Χάρη στην καινοτομία Power-In, η ενέργεια WINBACK δεν ήταν ποτέ τόσο ακριβής, για την άνεση τόσο του θεραπευτή όσο και του ασθενούς.

› Για το θεραπευτή

Όταν φοράτε το βραχιόλι στον καρπό σας, αντικαθιστάτε το ηλεκτρόδιο (RET). Η ενέργεια WINBACK περνά μέσα από τα χέρια σας στο σώμα του ασθενούς.

› Για τον ασθενή

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το βραχιόλι γύρω από τις περιοχές θεραπείας του ασθενούς σας, για τέλεια ισορροπία διάχυσης ενέργειας μεταξύ των δύο ζωνών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς

100W

Επεξεργαστές

Dual core

Συχνότητες

TECAR: 300 kHz, 500 kHz, 1000 kHz

Hi-TENS: 2 Hz, 5 Hz, 25 Hz

Hi-EMS: 1500 Hz, 4000 Hz

Modes

CET: deep, soft, dynamic

Hi-TENS: static, dynamic

Hi-EMS: radial, focal, dynamic CET, RET and

MIX intensity: low, medium, boost

SWAP: alternate RET and Hi-TENS

Standards

Manufactured according to ISO13485 standards CE 0068 - MTIC medical

Περιλαμβάνει

1 TX handle 11 electrodes: 4 CET, 4 RET, 1 Hi-RET, 2 multipolar electrodes, 2 bracelets 1 "Y" splitter cable, 2 fixed pads, 1 TECAR mobile RET cable, 1 TECAR mobile neutral cable, 1 RET adhesive cable, 1 neutral adhesive cable, 1 return handle, 1 return plate, 1 cart



Wi-Fi



Power-In




Multi-frequency



AI-Ready



Transportable

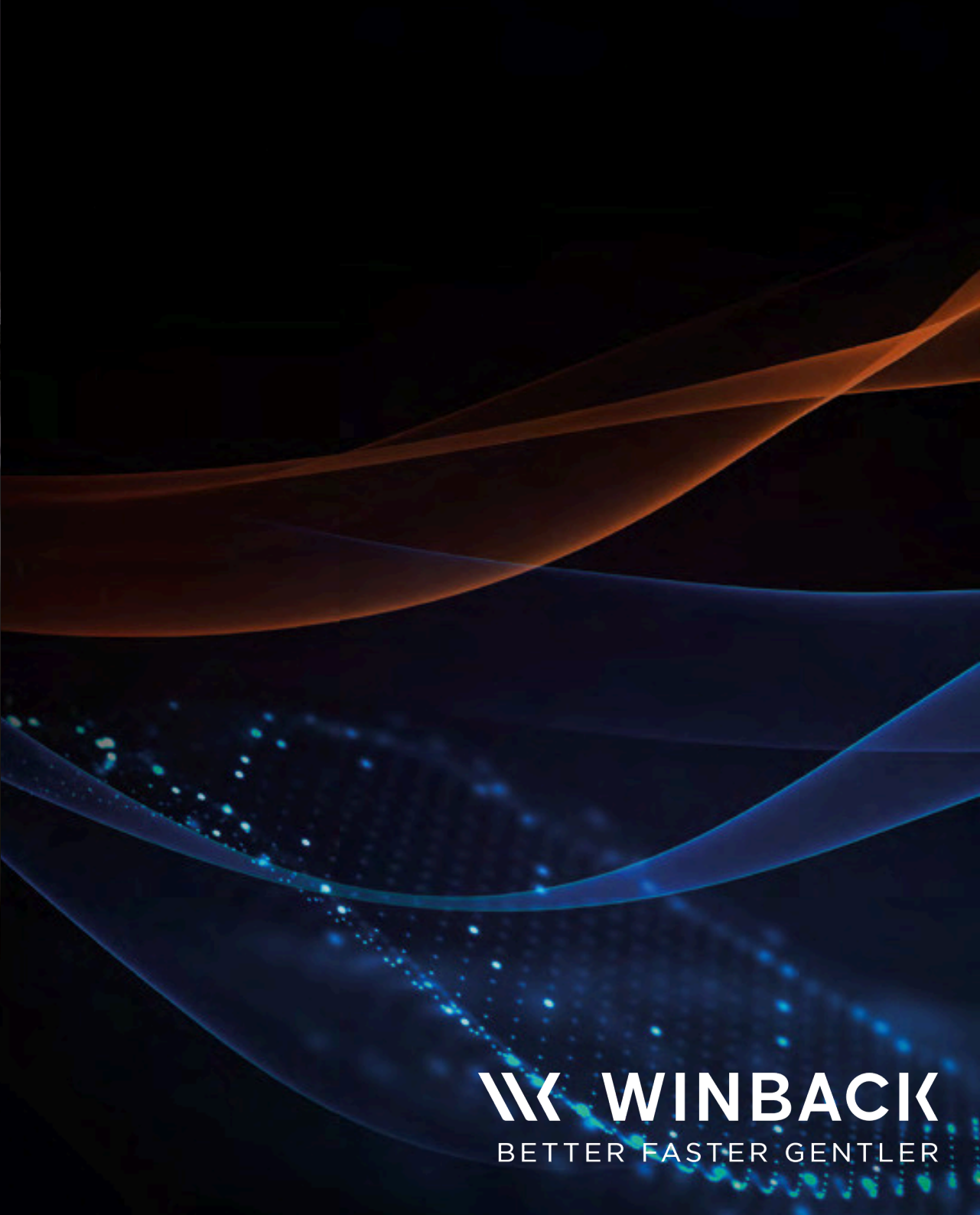

movemed[®]

medical solutions for people's treatment



Θησέως 34, Χαλάνδρι, 15234
T: 210 6801892 E: info@movemed.gr
www.movemed.gr

WINBACK
BETTER FASTER GENTLER